

Intended Use

The Nasus Nasal Spray Device is intended for Over-The-Counter Use.

Indication for use

The Taffix™ (Powder) Spray Device is indicated for use as a protective mechanical barrier against allergens and viruses within the nasal cavity.

What is Taffix™?

Taffix™ is used to block viruses within the nasal cavity, viruses that could penetrate the respiratory system and cause infection.

Taffix was found highly effective in blocking several respiratory viruses including SARS-CoV-2 in laboratory studies.

To protect against airborne viruses, Taffix™ should be used prior to exposure to a high risk environment where viruses may be airborne, such as public place (e.g., supermarkets, pharmacies, school, sport club, flight, etc.) or encounters with anyone outside of the isolated members of the household.

Taffix™ may be applied up to 3 times over the course of the day.

How does Taffix™ work?

Taffix™ is a powder nasal spray, the powder turns to a gel in the nose which creates an active barrier that shields, protects and deactivates airborne viruses found often in circulated air in open spaces, planes, trains, large shopping centers and public transportation.

If concurrent use of another nasal spray is required, Taffix™ should be re-applied afterwards so that the barrier created is not disturbed.

Taffix™ can be used in addition to other treatments, as part of combination therapy strategy in the fight against viruses. For example, Taffix™ may be used in addition to donning a mask and wearing gloves.

Taffix™ is not a drug and does not cause drowsiness.

Who can use Taffix™?

- Taffix™ is suitable for adults, athletes, and children from 12 years old.

Contraindications:

- Do not use this product if you are sensitive to cellulose, citric acid or Benzalkonium chloride.
- Consult a physician before using Taffix™ in children below age 12 or pregnant or breast-feeding women

⚠️ Cautions:

- Discard Taffix™ bottle on the expiration date printed on the bottle or 6 month after first opening - whichever comes first.
- To avoid contamination do not use this product for more than one person.
- May be used up to 3 times a day.
- Keep out of reach of young children.
- Avoid contact with open wounds.
- Avoid contact with eyes. If powder gets into your eye, rinse with water.
- Do not rinse the bottle with water or other liquid as this may block the bottle.
- Do not use if tamper evident seal is broken.
- Always close the cap.
- Very few cases of allergic reactions to this product have been reported. Most reports received have been blocked nose, runny nose, sneezing, sore throat. If you experience reactions more severe than these - then use the of the product should be discontinued immediately and if symptoms persist, consult your physician.
- Remember to squeeze the bottle gently to avoid excess powder emittance.

How to store Taffix™?

- Store at room temperature or between 5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F).
- Do not refrigerate or freeze.

How to use Taffix™?

To defend against airborne viruses, Taffix™ may be applied up to 3 times per day to maintain an effective barrier against viruses.

Remember - Taffix™ bottle cannot be shared with other people. Mark your bottle and avoid sharing it with other people to prevent potential transmission of viruses or germs.

Taffix™ bottle contains 1000 mg of powder (about 200 puffs). Once applied, Taffix™ becomes effective after a minute and is effective for approximately 5 hours.

Before you start using Taffix™ - you can practice by squeezing the bottle gently aiming it into the air and then follow the using instructions:


How to prepare a new Taffix™ for use?

- Take your Taffix™ Nasal Spray out of the package and open the cap
- Shake Taffix™ bottle
- Test spray into the air twice
- The Taffix™ is now ready for use



How to use the Taffix™?

Every time you take Taffix™ follow the instructions below

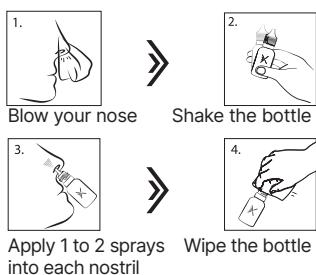

During first use, you may experience a tingling or burning sensation in the nose especially if the nasal tissue is sensitive or inflamed.

You may also feel some form of irritation, especially if your nasal membranes are already inflamed or irritated. This will subside quickly.

Some individuals can feel a slight sensation or blocked nose, this is normal and is the feel of the barrier created by Taffix™. If you experience continuous discomfort you can wash your nose with warm water until relief. If you experience serious discomfort after application of Taffix™ consult your physician.

Taffix™ bottle should be used for one person only, sharing a bottle with other people could expose them to infection!!

Chemical Composition: Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric Acid (6%), Sodium Citrate (4%), Benzalkonium Chloride (0.1%) and Menthol (<0.1%).

Taffix™ can be bought in several configurations:

- [REF]** 1841600 Taffix™ - 1 bottle of 1g powder
- [REF]** 1841602 Taffix™ Travel - 1 bottle of 0.7g powder
- [REF]** 1841603 Taffix™ Family - 4 bottles of Taffix™ (**[REF]** 1841600)



Nasus Pharma Ltd.

Harakevet 29 Tel Aviv, 6618306, Israel

Tel: +9723-573-6632

Fax: +9723-573-6664

Email: info@nasuspharma.com

Website: www.nasuspharma.com

Made in Israel



Registration number In Israel MOH (AMAR): 33010001



Mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71, D-30855

Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 39089530

Email: info@mdi-europa.com

Website: mdi-europa.com

Symbols Glossary:

	Legal Manufacturer
	CE Mark, indicating that the device complies with Council Directive 93/42/EC (MDD)
	Caution, consult accompanying documents
	Consult instructions for use
	Batch Number
	Catalogue number
	Authorized representative in the European Community
	Do not use if package is damaged
	Minimum and maximum storage temperatures
	Keep away from sunlight
	Expiry date (In format: YYYY-MM-DD)
	Keep dry

IT

Utilizzo previsto

Lo Spray Nasale Nasus è inteso per la vendita da banco.

Indicazione per l'uso

Il dispositivo Spray Taffix™ (polvere) è indicato per essere usato quale barriera meccanica protettiva delle cavità nasali contro allergeni e virus.

Cos'è Taffix™?

Taffix™ è usato per bloccare virus nelle cavità nasali, virus che potrebbero

penetrare nel sistema respiratorio e provocare infezioni.

In studi di laboratorio è stato rilevato che Taffix è altamente efficace nel bloccare vari virus respiratori tra cui la SARS-CoV-2.

Per proteggere contro virus trasmessi per via aerea, Taffix™ deve essere usato prima dell'esposizione in un ambiente ad alto rischio dove i virus (trasmessi per via aerea) possono essere presenti come luoghi pubblici (ad es. supermercati, farmacie, scuole, palestre, voli, ecc.) oppure prima dell'incontro con chiunque sia estraneo ai membri del nucleo familiare.

Taffix™ può essere applicato fino a 3 volte al giorno.

Come agisce Taffix™?

Taffix™ è uno spray nasale in polvere, nel naso la polvere si trasforma in gel creando una barriera attiva che scherma, protegge e blocca i virus trasmessi per via aerea che possono circolare in spazi aperti, aerei, treni, grandi centri commerciali e trasporti pubblici.

Se è necessario l'uso simultaneo di un altro spray nasale, Taffix™ deve essere riapplicato in seguito, in modo che la barriera creata non venga ostacolata.

Taffix™ può essere utilizzato in aggiunta ad altri trattamenti, come parte della strategia di terapia combinata nella lotta contro i virus. Ad esempio, Taffix™ può essere utilizzato in aggiunta all'uso di mascherina e guanti.

Taffix™ non è un farmaco e non provoca sonnolenza.

Chi può usare Taffix™?

- Taffix™ è indicato per adulti, atleti e bambini dai 12 anni in su.

Controindicazioni

- Non utilizzare questo prodotto se si è sensibili alla cellulosa, all'acido citrico o al cloruro di benzalconio.
- Consultare il medico prima di utilizzare Taffix™ su bambini sotto i 12 anni, donne in gravidanza o in allattamento.

⚠️ Attenzione:

- Non usare dopo la data di scadenza o 6 mesi dalla prima apertura - a seconda di quale dei due casi si verifichi per primo.
- Per evitare contaminazioni, non utilizzare questo prodotto per più di una persona.
- Può essere utilizzato fino a 3 volte al giorno.
- Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini
- Evitare il contatto con ferite aperte.
- Evitare il contatto con gli occhi. Se la polvere entra in contatto con gli occhi, sciacquare con acqua.
- Non sciacquare il flacone con acqua o altro liquido perché questo potrebbe bloccarlo.
- Non utilizzare in caso di rottura del sigillo di garanzia.
- Chiudere sempre il tappo.
- Sono stati segnalati pochissimi casi di reazioni allergiche a questo prodotto. La maggior parte delle segnalazioni ricevute sono state: ostruzione del naso, naso che cola, starnuti, mal di gola. Se si verificano reazioni più gravi di queste - allora l'uso del prodotto deve essere interrotto immediatamente e se i sintomi persistono, consultare il proprio medico.
- Premere delicatamente il flacone per evitare un'eccessiva emissione di polvere

Modalità di conservazione del Taffix™

- Conservare a temperatura ambiente o tra 5°C e 30°C (41°F ~ 86°F).
- Non refrigerare o congelare.

Modalità d'uso del Taffix™

Per difendersi da virus e allergeni e mantenere una barriera efficace contro di essi, Taffix™ può essere applicato fino a 3 volte al giorno.

Ricordate - La bottiglia di Taffix™ non può essere condivisa con altre persone. Contrassegna la tua bottiglia ed evita di condividerla con altre persone per evitare la potenziale trasmissione di virus o germi.

Il flacone di Taffix™ contiene 1000 mg di polvere (circa 200 dosi). Una volta applicato, Taffix™ diventa efficace dopo un minuto ed è efficace per circa 5 ore.

Prima di iniziare ad usare Taffix™ - potete fare pratica premendo delicatamente il flacone puntandolo nell'aria e poi seguire le modalità d'uso riportate di seguito:


Come preparare per l'uso un Taffix™ nuovo?

- Togliete il vostro spray nasale Taffix™ dalla confezione
- Agitate il flacone di Taffix™
- Testate lo spray nell'aria per due volte
- Il Taffix™ è ora pronto per l'uso



Come usare il Taffix™?

Ogni volta che usate Taffix seguite le sottostanti istruzioni

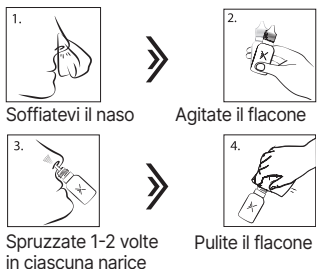

Al primo uso potrete sentire un formicolio o una sensazione di bruciore nel naso in particolare modo se la mucosa nasale è sensibile o infiammata.

Potrete anche sentire una certa irritazione in particolare modo se le mucose nasali sono infiammate o irritate. Questo passerà velocemente. Alcune persone potrebbero avere una lieve sensibilità o il naso tappato, ciò è normale ed è la percezione data dalla barriera creata da Taffix™. Se si avverte un disagio continuo ci si può lavare il naso con acqua calda fino a quando non si avverte un sollievo. Se dopo l'applicazione di Taffix™ il disagio è grave, consultare il proprio medico.

Il flacone di Taffix™ deve essere usato da una sola persona, dividerlo con altri potrebbe esporli a infezioni!

Composizione chimica: Ipromellosa (HPMC) (89.9%), Acido citrico (6%), Citrato di sodio (4%), Cloruro di benzalconio (0.1%) e Mentolo (<0.1%)

Taffix™ è disponibile in diverse tipologie:

- REF 1841600 Taffix™ - 1** confezione di 1g di polvere
- REF 184160 2 Taffix™ da viaggio -** 1 confezione di 0.7g di polvere
- REF 184160 3 Taffix™ Famiglia - 4** confezioni di 1g di polvere ciascuna (**REF** 1841600)



Nasus Pharma Ltd.

Harakevet 29 Tel Aviv, 6618306, Israel
Tel: +9723-573-6632

Fax: +9723-573-6664

Email: info@nasuspharma.com

Website: www.nasuspharma.com

Prodotto in Israel

Per informazioni: ATID SRL

Via Nomentana 305, 00198, Roma, Italia

Tel: +39 0686293011

Email: taffix@atidtech.com

Numero di registrazione in Israel MOH (AMAR): 33010001

EC REP Mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71, D-30855

Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 39089530

Email: info@mdi-europa.com

Website: mdi-europa.com

Glossario dei simboli:

	Produttore legale
	Simbolo CE indicante che il prodotto rispetta la Direttiva del Consiglio 93/42/EC (MDD)
	Attenzione, consultare i documenti allegati
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Numero del lotto
	Numero di catalogo
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Non usare se la confezione è danneggiata
	Temperature minime e massime di conservazione
	Tenere lontano dalla luce solare
	Data di scadenza (nel formato: YYYY-MM-DD)
	Conservare all'asciutto

ES

Uso previsto

Dispositivo di pulverizzazione nasal Nasus está diseñado para su uso sin receta.

Indicación de uso

Taffix™ (polvo) Dispositivo de pulverización nasal Nasus está indicado para su uso como barrera mecánica protectora contra alérgenos y virus dentro de la cavidad nasal.

¿Qué es Taffix™?

Taffix™ se usa para bloquear virus dentro de la cavidad nasal, que podrían penetrar en el sistema respiratorio y causar infección.

En estudios de laboratorio se comprobó que Taffix es altamente efectivo para bloquear diversos virus respiratorios, incluido el SARS-CoV-2.

Para protegerse contra los virus en el aire, Taffix™ debe usarse antes de la exposición a un entorno de alto riesgo donde los virus pueden estar en el aire, como lugares públicos (por ejemplo: supermercados, farmacias, escuelas, clubes deportivos, vuelos, etc.) o encuentros con cualquier persona, fuera de los miembros aislados del hogar.

Taffix™ puede aplicarse hasta 3 veces en el transcurso del día.

¿Cómo funciona Taffix™?

Taffix™ es un spray nasal en polvo que se convierte en gel en la nariz, creando una barrera activa que protege y desactiva los virus que se encuentran en el aire, en espacios abiertos, aviones, trenes, grandes centros comerciales y transporte público.

Si se requiere el uso concurrente de otro spray nasal, Taffix™ se debe aplicar después, para que la barrera creada no se altere.

Puede usarse Taffix™ en adición a otros tratamientos, como parte de la estrategia de terapia combinada en la lucha contra los virus. Por ejemplo, Taffix™ puede usarse además de ponerse una máscara y usar guantes.

Taffix™ no es un medicamento y no causa somnolencia.

¿Quién puede usar Taffix™?

Taffix™ es adecuado para adultos, atletas y niños a partir de 12 años.

Contraindicaciones:

- No use este producto si es sensible a la celulosa, al ácido cítrico o al cloruro de benzalconio.
- Consulte a un médico antes de usar Taffix™ en niños menores de 12 años o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

⚠️ Precauciones:

- No lo use después de la fecha de vencimiento o 6 meses después de la primera apertura, lo que ocurra primero.
- Para evitar la contaminación, no use este producto para más de una persona.
- Se puede usar hasta 3 veces al día.
- Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Evite el contacto con heridas abiertas.
- Evite el contacto con los ojos. Si le entra polvo en los ojos, enjuague con agua.
- No enjuague la botella con agua u otro líquido, ya que esto puede bloquear el frasco.
- No lo use si el sello de seguridad está roto.
- Siempre cierre la tapa.
- Se han reportado muy pocos casos de reacciones alérgicas a este producto. La mayoría de los informes recibidos han sido obstrucción nasal, secreción nasal, estornudos y dolor de garganta. Si experimenta reacciones más graves que estas, el uso del producto debe suspenderse inmediatamente y si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- Recuerde apretar el frasco suavemente para evitar el exceso de emisión de polvo.

¿Cómo almacenar Taffix™?

- Almacene a temperatura ambiental o entre 5°C y 30°C (41°F ~ 86°F).
- No refrigerar o congelar.

¿Cómo usar Taffix™?

Para defenderse contra los virus en el aire, Taffix™ puede aplicarse hasta 3 veces al día para mantener una barrera efectiva contra los virus.

Recuerde: el frasco de Taffix™ no se puede compartir con otras personas. Marque su botella y evite compartirla con otras personas para evitar la posible transmisión de virus o gérmenes.

El frasco Taffix™ contiene 1000 mg de polvo (aproximadamente 200 inhalaciones). Una vez aplicado, Taffix™ se hace efectivo después de un minuto y permanece efectivo durante aproximadamente 5 horas.

Antes de comenzar a usar Taffix™, puede practicar apretando suavemente el frasco apuntando hacia el aire y luego siga las instrucciones de uso a continuación:

¿Cómo preparar un nuevo Taffix™ para su uso?

- Saque su Taffix™ Nasal Spray del paquete y abra la tapa.
- Agite el frasco Taffix™
- Pruebe apretando el frasco dos veces en el aire



•El Taffix™ está listo para su uso

¿Cómo usar el Taffix™?

Cada vez que usar Taffix™, siga las instrucciones a continuación:



Aplicar 1 o 2 veces En cada fosa nasal

Limpiar el frasco

Durante el primer uso, puede experimentar una sensación de hormigueo o ardor en la nariz, especialmente si el tejido nasal es sensible o está inflamado.

También puede sentir algún tipo de irritación, especialmente si sus membranas nasales ya están inflamadas o irritadas. Esto disminuirá rápidamente.

Algunas personas pueden sentir una ligera sensación o nariz tapada, esto es normal y es la sensación de la barrera creada por Taffix™. Si experimenta molestias continuas, puede lavarse la nariz con agua tibia hasta aliviar la molestia. Si experimenta molestias graves después de la aplicación de Taffix™, consulte a su médico.

¡El frasco Taffix™ debe usarlo solo una persona! ¡Compartirlo con otras personas podría exponerlas a una infección!

Composición química: Hipromelosa (HPMC) (89.9%), Acido cítrico (6%), citrato de Sodio (4%), Cloruro de Benzalconio (0.1%) y Mentol (<0.1%).

Taffix™ se puede comprar en varias configuraciones:

- REF 1841600 Taffix™ - 1** frasco de 1 g de polvo
- REF 1841602 Taffix™ Travel - 1** frasco de 0.7 g de polvo
- REF 1841603 Taffix™ Family - 4** frascos de 1 g de polvo cada uno (**REF** 1841600)



Nasus Pharma Ltd.

Harakevet 29 Tel Aviv, 6618306, Israel

Tel: +9723-573-6632

Fax: +9723-573-6664

Email: info@nasuspharma.com

Website: www.nasuspharma.com

Fabricado en Israel



Nº de Registro en Israel MOH (AMAR): 33010001

EC REP Mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71, D-30855

Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 39089530

Email: info@mdi-europa.com

Website: mdi-europa.com

Glosario de Símbolos:

	Fabricante Legal
	Marca CE, que indica que el dispositivo cumple con la Directiva 93/42 / CE (MDD) del Consejo
	Atención, consulte los documentos adjuntos.
	Consulte las instrucciones de uso
	Número de lote
	Número de catalogo
	Representante autorizado en la Comunidad Europea.
	No lo use si el paquete está dañado
	Temperatura mínima y máxima para almacenamiento
	Mantener alejado de la luz solar.
	Fecha de caducidad (en formato: AAAA-MM-DD)
	Mantener seco

NASUS PHARMA

IFU-0001-TA Ver. 1.0 2020/12